

# EZee Life™

---




Bath Seat without a Back  
Siège de bain sans dossier

Model: CH1050TF

Modèle: CH1050TF

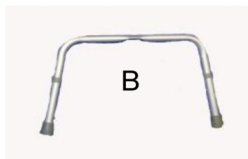

**1****BATH SEAT PARTS GUIDE - Pièces du siège de bain**

- A. Seat (x1)
- B. Legs (x2)
- C. Hand screw & washer combinations (x5)

- A. Siège (x1)
- B. Pattes (x2)
- C. Assemblage vis à main et rondelle (x2)

**2****TOOLS REQUIRED: None**  
**OUTILS REQUIS : Aucun**


**3** Attach the two sets of legs to the seat. Loosely fasten the middle screw first and then the other four before going back and tightening the middle the rest of the way

**NOTE:** to ensure a proper fit the set of legs on the bottom should have the concave (dent-like) form so that the top set of legs fit nicely in place

Fixez les deux pattes doubles au siège. Vissez d'abord sommairement la vis du centre. Vissez les quatre autres vis avant de serrer complètement celle du centre.

**NOTE :** pour assurer un ajustement approprié, placez la patte double présentant une forme concave (creusée) en dessous de sorte que la patte double du dessus s'y insère facilement.

Loosely fasten first, then tighten at the end.  
Vissez d'abord sommairement et serrez en dernier.

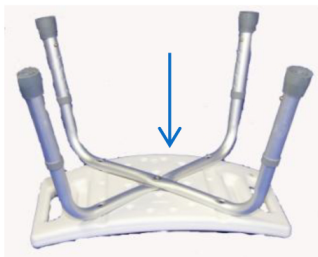

**4** ADJUSTING THE LEGS TO ACHIEVE DESIRED SEAT HEIGHT - RÉGLEZ LES PATTES SELON LA HAUTEUR DU SIÈGE DÉSIRÉE



PUSH IN & CLICK  
INSÉREZ ET CLIQUEZ



## Safety Precautions

1. Consult your doctor, therapist, or other qualified professional to determine if this mobility device meets your specific needs.
2. Before using, make sure all parts are secure and the frame is fully opened

## Mesures de sécurité

1. Consultez votre médecin, thérapeute ou autre professionnel qualifié afin de déterminer si ce dispositif d'aide à la mobilité répond à vos besoins.
2. Avant l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et que le cadre est complètement ouvert.

## Limited Warranty

Ezee Life products carry a one year warranty against manufacturing defects, faulty materials and workmanship only. Any alterations, misuse, abuse, or accidental damage voids this warranty. Factory Direct Medical reserves the right to replace or repair any part that has become defective. The warranty does not extend to consequential costs resulting from the fault or defect of the product: freight and travel costs, loss of earnings, or other expenses that one may incur. Warranty is valid for the original purchaser only and the original receipt must be presented before any warranty options are considered. Please also be prepared to provide the date of purchase and serial number

## Garantie limitée

Les produits de marque EZee Life s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat. Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. Factory Direct Medical se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse. La garantie de n'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles. La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.

Imported / Distributed by:

Importé / Distribué par :



34 Futurity Gate, Unit 15  
Vaughan, Ontario L4K 1S6

GTA: 416-739-1267

Toll Free: 888-634-5808

Fax: 416-739-7171